



VENPUNKTIONSARM SORTIMENT

Sortimentet av venpunktionsarmar utgör den idealiska träningsplattformen för att träna på de färdigheter som krävs för venpunktion och IV-kanylering.

Det är lämpligt för träning både under och efter avslutad utbildning.

70304

70305

GRUNDLÄGGANDE

70302

70303

STANDARD

70300

70301

AVANCERAD


NYHET



PATENTSÖKT
NR: GB 20167007.8

Utbildning har aldrig varit mer likt verkligheten

limbsandthings.com

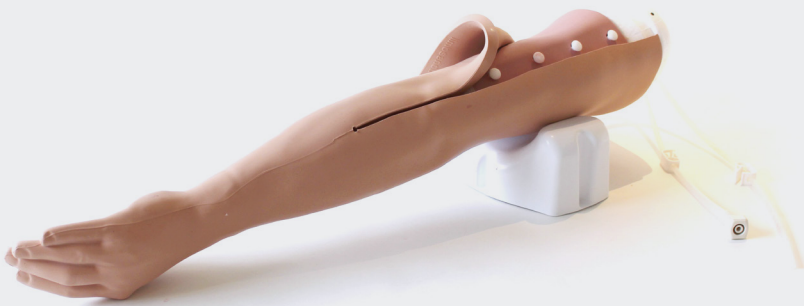


Den patentsökta hudläsmekanismen gör det lätt att sätta på ny hud på modellen, samtidigt som den verklighetsliknande haptiken i de underliggande och fullt palperbara kungs-, huvud- och dorsala metakarpala venerna bibehålls.

VENPUNKTIONSARM, GRUNDLÄGGANDE

70304

70305

Denna modell, som är utformad med en grundläggande venstruktur innehåller endast kungs- och huvudvenerna.

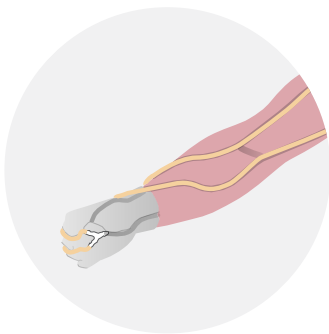


VENPUNKTIONSARM, STANDARD

70302

70303

För kostnadseffektiv träning innehåller det modulära vensystemet ACF och metakarpal venanatomi.


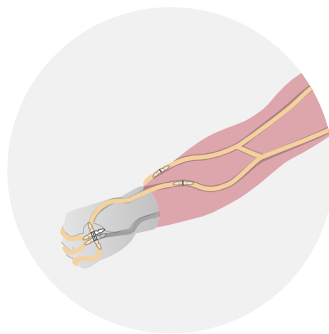


VENPUNKTIONSARM, AVANCERAD

70300


70301

Den avancerade armen för venpunktion innehåller ACF och metakarpal venanatomi som är ansluten till ett trycksatt vätskesystem för realistisk blodförsörjning.

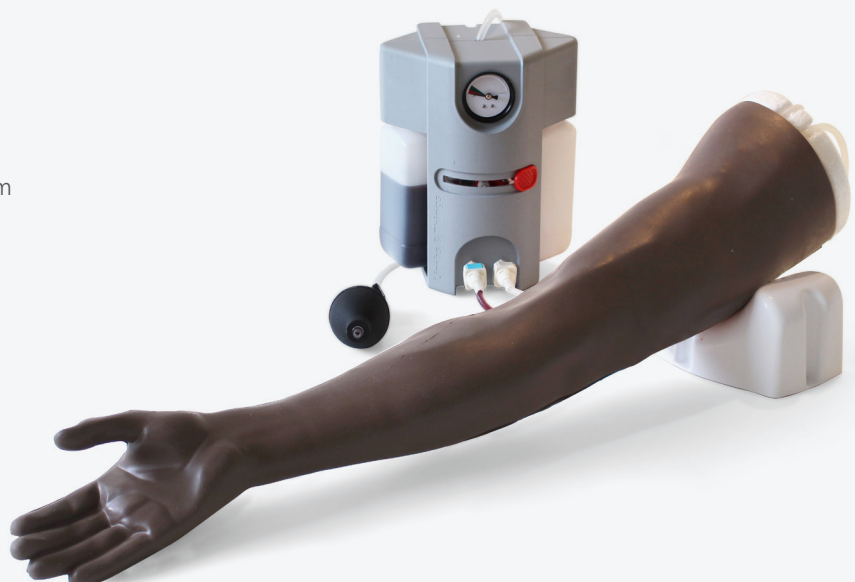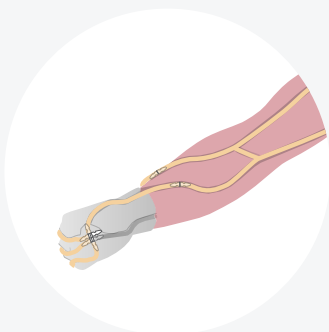

FÄRDIGHET

- Venpunktion
- IV-kanylering
- IV-infusion
- Träna på aseptisk teknik

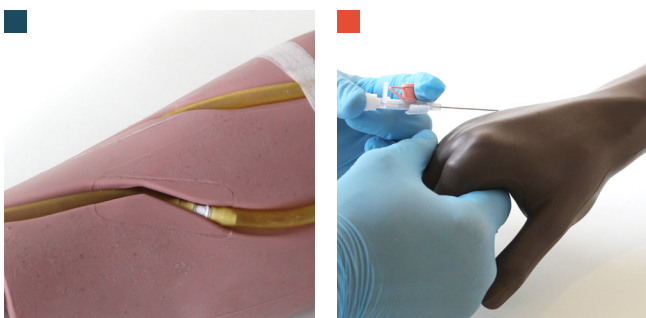

- Visuell inspektion och palpering
- Gripsystemet ger verklighetsliknande venplacering
- Möjlighet att positionera handen för verklighetsliknande införande av nål

EGENSKAPER

REALISM

- Realistiskt återflöde av blod
- Mer realistiskt utseende och känsla på armen
- Gripsystemet ger verklighetsliknande venplacering

DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA

- Realistisk och palperbar venhaptik som främjar korrekt klinisk användning
- Lättplacerat hudlåsssystem (patentsökt) ökar den anatomiska realismen
- Ny vengreppsfunktion underlättar korrekt venpositionering och ger upprepbar träning och en enklare process för att sätta på ny hud
- Möjlighet att applicera fingertryck för att stämma blodflödet
- Infusions slang gör det möjligt att administrera IV-vätskor
- Kan användas tillsammans med en simulerad patient

MÅNGSIDIGHET

- Kompatibel med vakuumbloodprovtagningsystem, nål och spruta samt IV-kanyler
- Hållbar hud
- Förlängd slang gör det möjligt att ha en simulerad patient i klassrumsmiljö
- Venerna klarar 500 stick med en nål på 21 G.
- Armen kan uppgraderas genom att köpa venmoduler och den avancerade tryckpumpen

SÄKERHET

- Grundläggande, standard och avancerade vener innehåller latex
- En latexfri grundläggande ven finns, men har sämre hållbarhet

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Lätt att rengöra och utföra service och underhåll på

JÄMFÖRELSE AV NYA FUNKTIONER

	70304	70302	70300
	70305	70303	70301
• Patenterad hudlåsmekanism	✓	✓	✓
• Vengreppssystem för enkel installation	✓	✓	✓
• Modulära vener för kostnadseffektiv träning	×	✓	✓
• Realistiska, palperbara vener	✓	✓	✓
• Realistiskt återflöde av blod	✓	✓	✓
• Förlängd slang för hybridssimulering	✓	✓	✓
• Självtryckssystem	✓	✓	×
• Trycksatt vätskesystem	×	×	✓

FÖLJANDE INGÅR

	70304	70302	70300
	70305	70303	70301
Venpunktionsarm	✓	✓	✓
Hud till venpunktionsarm	✓	✓	✓
Venpunktionsarm, grundläggande	✓	×	×
ACF-venmodul	×	✓	✓
Metakarpal venmodul	×	✓	✓
Blodförsörjningssystem med självtryck	✓	✓	×
Trycksatt, venpunktionsförsörjning	×	×	✓
Koncentrerat venöst blod – startpaket	✓	✓	✓
Stöd för venpunktionsarm	✓	✓	✓
Påfyllningsflaska	×	×	✓
Infusions slang för venpunktionsarm	✓	✓	✓
Glidmedel (3 st)	✓	✓	✓



UTBILDNINGSPREFERENSER

GRUNDLÄGGANDE VÅRDUTBILDNING

Outcomes for graduates (Tomorrow's Doctors), 2016, Appendix 1, Practical procedures for Graduates, p.12-14

POSTGRADUATE FY1 AND FY2

UK Foundation Programme Curriculum, updaterad 2014, p.50

TRÄNING PÅ MEDICINSKA GRUNDKUNSKAPER

Specialty Training Curriculum For Core Medical Training, 2013, p.165

UTBILDNING I AKUTVÅRD

The Royal College of Emergency Medicine Curriculum and Assessment Systems For Training in Emergency Medicine, 2015 (reviderad 2016)

UNDERLÄKARE

NHS National Practitioner Program: Matrix Specification for the Physician Associate, 2016), p.127

LEGITIMERADE SJUKSKÖTERS KOR

NMC Future Nurse: Standards of proficiency for registered nurses, 2018, p.32

UNDERSKÖTERS KOR

The Cavendish Review - An Independent Review into Healthcare Assistants and Support Workers in the NHS and social care settings, 2013, p.18

KLINISK LABORATORIEPERSONAL

UCL Medical School, Clinical Skills, hämtad från: www.ucl.ac.uk/medicalschooll/cpsc/phlebotomy

SW 2021



BESTÄLL OFFERT



BESTÄLL EN DEMO



KUNDSUPPORT

limbsandthings.com